

Track-V vacuum Thermoforming Unit

◆ 吸引式熱成型器

電源をコンセントに差し込むだけですぐに使用できます。バキュームユニットなどに接続する必要はありません。

◆ コンピューター制御

タッチパネルの表示ガイドに従って操作。温度センサーとプリプログラムにより適切な加熱と冷却が行えます。

◆ プリプログラムされたファイル情報


FORESTADENT社のトラック サーモフォーミング フォイルの情報は予めプログラムされています。使用するフォイルを選択するだけで最適な成型時間と温度を設定できます。

◆ 他社製品フォイルの登録も可能

ユーザープログラムを利用して現在使用している他社製のフォイルをお気に入りリストに登録しておくと、いつでも迅速に作業することができます。



様々な素材がそろった、トラック サーモフォーミング フォイルをご利用ください。

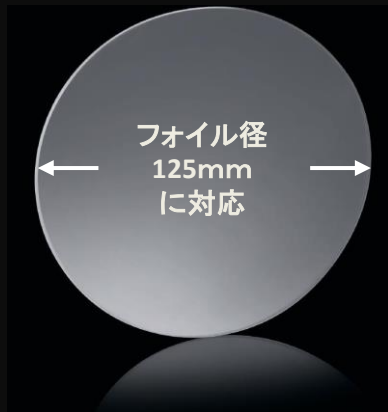

歯科技工用吸引型成型器

トラック V サーモフォーミングユニット

歯科技工用吸引型成型器

トラックV サーモフォーミングユニット

一般医療機器
届出番号:13B1X10233F00009
販売名:トラック V
EMC適用規格 JIS T0601-1-2:2002

テクニカル データ

ユニット寸法:
315(H) x 350(W) x 370(D) mm
ユニット重量:
11.9kg
使用フォイル寸法:
直径 125mm
厚さ 0 - 6mm
フォームポッド寸法:
内径 101mm
内高 42mm
消費電力:
110 V、340W(ヒーター部含む)
フューズ:
2 x T-4A (100/115V)
ヒーター部:
赤外線ヒーター 100V / 280W
吸引部:
吸引 0.8bar
容量 6L/min
騒音レベル <70db(A)



製品番号 900-2110

オプション品 / 消耗品

注文番号	イメージ	入数	内容
408-0706		1 セット	オクルーフォーム (対合歯圧跡付加器)
408-0705		1	カバーテンプレート
900-2012		1	マグネット付ステンレスペレット ブラシ
900-2001		1 BT	補充用ステンレスペレット (散弾)
900-2016		1	フォイルレセプション用シーリングゴム
900-2017		1	フォームポッド用シーリングゴム

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>